

**Starazolin Lipid
Multi Balance
acu pilieni, emulsija**

Lietošanas instrukcija – lūdzam to uzmanīgi izlasīt

Starazolin Lipid Multi Balance acu pilieni ir paredzēti, lai atvieglotu vidēji smaga līdz smaga sausās acs sindroma simptomus, ko izraisis asaru plēvītes lipīdu slāņa deficīts, kas savukārt izraisa pārmērīgu ūdens slāņa iztvaikošanu un acu sausumu.

SASTĀVS

Starazolin Lipid Multi Balance ir sterila acu pilienų emulsija, kas satur nātrija hialuronātu 0,15 %, rīcineļļu 0,25 %, tokoferolsolānu (E vitamīna TPGS), glicerīnu, polisorbātu 80, makrogolglicerīna hidroksistearātu, trometamolu, sālskābi, dinātrija edetātu, nātrija hlorīdu, attīrītu ūdeni.

Rīcineļļa, E vitamīna TPGS un makrogolglicerīna hidroksistearāts izveido garo ķēžu triglicerīdu (LCT) kompleksu.

Bez konservantiem.

Bez fosfātiem.

LIETOŠANAS NOLŪKS

Starazolin Lipid Multi Balance acu pilieni ir paredzēti vidēji smaga līdz smaga sausās acs sindroma simptomu atvieglošanai. Šie pilieni atjauno asaru plēvītes lipīdu slāni, stabilizē asaru plēvīti un optimāli mitrina acs virsmu.

Neatkarīgi no tā, vai acs sausumu ir izraisījis nepietiekams asaru ūdens vai lipīdu komponenta daudzums, acs virsmas sausums izraisa nepatīkamus simptomus, kas, ja netiek adekvāti ārstēti, ar laiku tikai pastiprinās. Acu sausuma iespējamās izpausmes ir smilšu vai svešķermeņa klātbūtnes sajūta acī, kairinājums, dedzināšanas sajūta, nieze, pārmērīga acu asarošana un acu apsārtums.

Acu sausums ir saistīts ar novecošanās procesu, noteiktu zāļu lietošanu, hormonālām pārmaiņām, slodzi acīm (kontaktlēcu lietošanu), dažādu vides faktoru (sausā gaisa, vēja vai gaisa kondicionētāja darbības) ietekmi un dažādu mūsdienų dzīves radīto riska faktoru ietekmi (ilgstoša skatīšanās datora, mobilā tālruņa, televizora ekrānā), kad būtiski samazinās acu mirkšķināšanas reižu skaits minūtē un tādēļ vājinās optimālā asaru sekrēcija.

Starazolin Lipid Multi Balance satur rīcineļļas, E vitamīna un virsmaktīvu vielu izveidota **LCT kompleksa nanopilienu**, kas atjauno un aizsargā asaru lipīdu slāni – dabisko barjeru pret mitruma iztvaikošanu.

Turklāt **Starazolin Lipid Multi Balance** acu pilienų sastāvam pievienotais nātrija hialuronāts efektīvi **mitrina acis** un tūlīt atvieglo sausuma simptomus.

Pilieni ir piemēroti lietošanai pret visām acu sausuma formām.

BRĪDINĀJUMI UN PIESARDZĪBA

Nelietojiet Starazolin Lipid Multi Balance,

- ja Jums ir paaugstināta jutība (alerģija) pret kādu no šo pilienų sastāvdaļām.

Ja radusies alerģiska reakcija, nekavējoties pārtrauciet šo pilienų lietošanu un konsultējieties ar ārstu.

Citi brīdinājumi

- Nelietojiet pilienus, ja pamanāt, ka ir bojāta pudelīte vai pudelītes aplikators.
- Lietošanas drošuma un higiēnas apsvērumu dēļ katru pudelīti ir atļauts lietot tikai vienai personai.
- **Starazolin Lipid Multi Balance** acu pilienus un citu acu pilienus vai acu ziežu mijiedarbība nav zināma. Ja lietojat arī citu acu līdzekli, pirms **Starazolin Lipid Multi Balance** lietošanas konsultējieties ar savu ārstu.

Starazolin Lipid Multi Balance ir paredzēts lietošanai pieaugušajiem no 18 gadu vecuma.

Pirms šo acu pilienus lietošanas bērnam konsultējieties ar veselības aprūpes speciālistu, lai pārliecinātos, ka tie Jūsu bērnam ir piemēroti.

Piezīme

Pilienu lietošana var izraisīt vieglu redzes miglošanos. Šādā gadījumā šai īsajā laikā ir ieteicams atturēties no automašīnas vai cita transportlīdzekļa vadīšanas vai darba ar iekārtām un nogaidīt, līdz ir atjaunojies redzes asums.

PILIENU DROŠUMS

Starazolin Lipid Multi Balance acu pilieni nesatur ne **konservantus**, ne **fosfātus**, tādēļ mazinās acs virsmas kairinājuma un bojājumu iespējamību.

Pilinātājā ir iestrādāts filtrs, kas pilienu lietošanu padara drošu, jo nepieļauj acu pilienus piesārņošanu un saglabā satura sterilitāti pat sešus mēnešus pēc iepakojuma atvēršanas.

Kopumā pilieni ir labi panesami, tomēr tad, ja pamanāt kādas blakusparādības, sazinieties ar ārstu vai farmaceitu.

STARAZOLIN LIPID MULTI BALANCE LIETOŠANA

Starazolin Lipid Multi Balance vienmēr jālieto tā, kā norādīts šajā lietošanas instrukcijā. Ja Jums kaut kas nav skaidrs, pirms lietošanas konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu.

Ja Jūsu ārsts nav norādījis citādi, pēc nepieciešamības vairākas reizes dienā iepilniet acīs pa 1–2 pilieniem.

Vairākas reizes samirkšķiniet acis, lai pilienus vienmērīgi izkliedētos pār acs virsmu.

Izvairieties ar pilinātāja galu pieskarties acs vai kādai citai virsmai.


Pirms pirmās lietošanas pudelīte jāaktivizē. Lai to izdarītu, noņemiet sūkņa aizbāzni, apvērsiet pudelīti otrādi un **vairākas reizes saspiediet aplikatoru, līdz parādās pirmais pilienis.**

Informācija kontaktlēcu lietotājiem

Šie pilieni ir saderīgi ar kontaktlēcām.

Lietošanas instrukcija

1. Rūpīgi nomazgājiet rokas.
2. Noņemiet sūkņa aizbāzni (1. attēls).
3. Satveriet sūkni ar roku, kā parādīts 2. attēlā.
4. Apvērsiet pudelīti otrādi un spiediet aplikatoru, līdz parādās pirmais pilienis (3. attēls).
5. Atlieciet galvu un uzmanīgi iepilniet acī vienu pilienus (4. attēls).
6. Uzlieciet atpakaļ sūkņa aizbāzni.

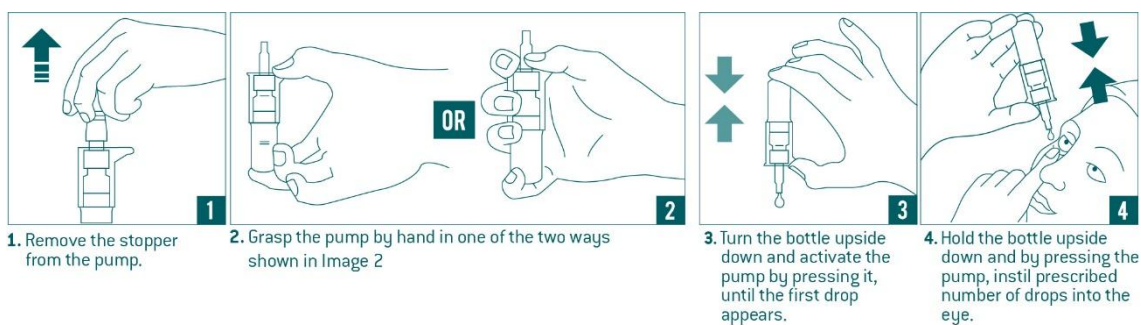

1. Noņemiet no sūkņīša aizbāzni.

2. Satveriet sūkņīti ar roku vienā no diviem veidiem, ka parādīts 2. attēlā.

3. Apvērsiet pudelīti otrādi un aktivizējiet sūkņīti, to spiežot, līdz parādās pirmais piliens.

4. Turot pudelīti ar augšdaļu uz leju un spiežot sūkņīti, iepiliniet acī nozīmēto skaitu pilienu.

RAŽOTĀJS

JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.d. Svilno 20, 51000 Rijeka, Horvātija

IZPLATĪTĀJS

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA S.A.
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański, Polija

DERĪGUMA TERMIŅŠ

Uzdrukāts uz iepakojuma.

Pēc iepakojuma atvēršanas derīgi 6 mēnešus.

Nelietot pilienus, kad pagājis to derīguma termiņš.

UZGLABĀŠANA

Uzglabāt pilienus oriģinālajā iepakojumā, temperatūrā līdz 30 °C.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nesasniedzamā vietā.

IEPAKOJUMS

10 ml

